

Hibaelhárítás

Ha	Próbáld ki ezt
A LED-ek pirosan villognak	Az akkumulátor töltöttségi szintje alacsony. Töltsd fel a Vibio-t a mellékelt kábel segítségével.
A LED-ek nem világítanak	Az elemek lemerültek. Töltsd fel a Vibio-t körülbelül 1,5 órán keresztül. Kezdje a Bluetooth-kapcsolat ellenőrzésével az alkalmazás kezdőképernyőjén. Ha a Vibio ikon piros és áthúzott, próbálja meg a következőket: 1 Tegye hatótávolságon belülre. Vigye a mobilt közelebb a Vibio-hoz. 2 A Bluetooth ki- és bekapcsolása. Nyissa meg a Vezérlőközpont / Gyorsbeállítások panelt a mobilján, és koppintson a Bluetooth ikonra. Ha még mindig nem működik, akkor manuálisan vissza kell állítani és újra kell csatlakoztatni a Vibio párna rezgőt és az alkalmazást. Próbálja ki a következőket: 1 Kényszerítse az alkalmazásból való kilépést. Vegye figyelembe, hogy nem elég csak bezárni! 2 Válassza le a Vibio-t. Válassza a Beállítások > Bluetooth menüpontot. A "Vibio" leválasztásához koppintson az i ikonra/ és felejtse el ezt az eszközt. Gy meg róla, hogy a Bluetooth be van kapcsolva.  3 Vibio visszaállítása. Húzza és tartsa a pántot, amíg a LED-ek villogni nem kezdenek. Engedje el és húzza újra, amíg a LED-ek kék színben kezdenek el világítani. 4 Vibio beállítása. Indítsa el újra a Vibio alkalmazást, és kövesse az utasítást.
Rendeltetészerű használat Személyes rezgő ébresztő készülék, amely mobiltelefonos alkalmazással használható ébresztésre. Táp és akkumulátor Akkumulátor: 1x 3,7 V-os AA lítium-ion akkumulátor Energiafogyasztás: Aktiv, erős Rezgés: < 1000 mA, üresjárat: < 100 µA Működési idő: Töltési idő: Legfeljebb 10 nap / töltés: Töltési idő: Legfeljebb 1,5 óra @ 500mA Töltési áram: Legfeljebb 1,5 óra @ 500mA: 5V DC Kompatibilitás iOS11 / Android 4.4 és újabb, iPhone 5s és újabb / Modern Android készülékek	Méreték és súly Méret: 27x 94x 94 mm, 1.1 x 3.7x 3.7" Utáratások al. Súly: 153 g, 5.4 oz. Szabályozási követelmények Megfelel a CE, RCM, BQB, RoHS, WEEE, Der Grüne punkt, CE, RCM, BQB, RoHS, WEEE, Der Grüne punkt követelményeknek Környezeti követelmények Csak beltéri használatra Hőmérséklet: HŐMÉRSÉKLET: 0°- 35° C, 32°- 95° F Relatív páratartalom: 5% - 95% Biztonsági és garanciális feltételek Lásd a külön mappát Bellman & Symfon AB Södra Långbergsgratan 30, 436 32 Askim, Svédország. Telefon +46 31 68 28 20 info@bellman.com © és TM 2019, Bellman & Symfon AB, minden jog fenntartva.




Amire szükséged lesz

- iOS11 / Android 4.4 vagy újabb verziójú mobiltelefon.
- USB hálózati adapter

Mi van a dobozban

- 1 Töltőkábel
- 2 Vibio párna rezgő

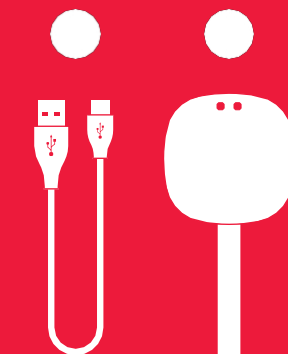

Vibio párna rezgő, BE1221

ANGOL

Keresd a villogó lámpákat

- A fehér szín azt jelenti, hogy riasztás van vagy a mobiltelefonnal való kommunikáció aktiv.
- A kék azt jelenti, hogy készen áll a párosításra.
- A zöld azt jelenti, hogy töltődik.
- A sárga szín azt jelenti, hogy bejövő hívás vagy üzenet érkezett.
- A piros szín azt jelenti, hogy az akkumulátor töltöttségi szintje alacsony.




A Vibio telepítése

1 Kapcsolja be

Csatlakoztassa a töltőkábelt a Vibio készülékhez, és csatlakoztassa a csatlakozót egy USB-s hálózati adapterhez vagy egy USB-s számítógépes konnektorhoz.

2 Kapcsolja be

Tolja el a be/ki kapcsolót jobbra, és tartsa a Vibio egységet közel a mobiljához.

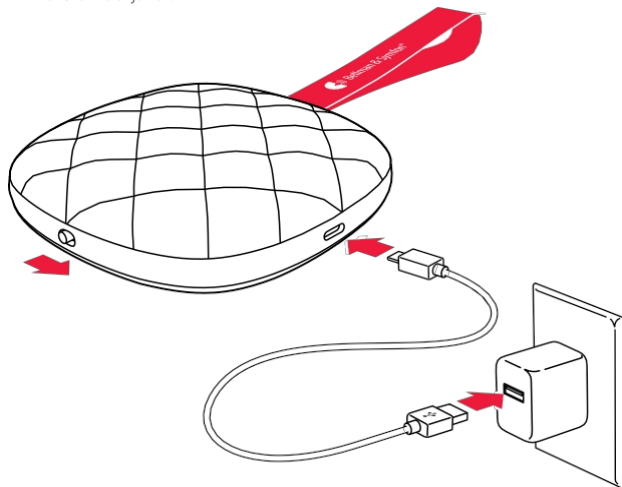

3 Telepítse az alkalmazást



Töltse le a **Vibio** alkalmazást az App Store®-ból vagy a Google Play™ alkalmazásból, és kövesse a beállítási utasításokat.



Az alkalmazás használata

Riasztások kezelése



Add. Érintse meg a plusz gombot egy új riasztás beállításához.



Szerkesztés. Érintse meg a ceruza gombot a riasztás szerkesztéséhez.



Törölje. Érintse meg a mínusz gombot a riasztás törléséhez.



Be/Ki. Érintse meg az ON vagy OFF gombot a riasztás engedélyezéséhez vagy letiltásához.

Vibio megfigyelése



Csatlakozás. A Vibio ikon mutatja a kapcsolat állapotát.



Akkumulátor. Az akkumulátor ikon mutatja az akkumulátor aktuális töltöttségi szintjét.

Több információ



Segítség. Koppintson a Menü > Súgó ikonra az alkalmazással kapcsolatos további információkért.

